

HEMOVIDA WEB

CICLO DO SANGUE

Guia de Impressão para Etiqueta Térmica

Objetivo deste Documento

As funcionalidades de impressões contidas no sistema HEMOVIDA-WEB foram construídas para imprimirem através da linguagem ZPL II e para impressoras compatíveis com essa linguagem.

Este guia te auxiliará a instalar a impressora.

Pré-Requisitos

A impressora poderá ser usada localmente ou compartilhada em rede e em ambos os casos deverá ter o drive instalado na máquina, na qual o usuário estiver utilizando o sistema.

A impressora deve estar configurada como **PADRÃO**.

Os navegadores Chrome e Firefox devem estar atualizados.

Passo 1: Após baixar o instalador da impressora, localize e **inicie** a instalação.




Passo 2: Dê um duplo clique e após executar o arquivo, a instalação do componente “QZ Tray Setup” será solicitada;


Selecione: “**Next**”;



Passo 3: Aparecerá a tela de Choose Install Location;
Confirme se o destino está preenchido com o valor "C:\Program Files\QZ Tray".
Selecione a opção: "**Install**";

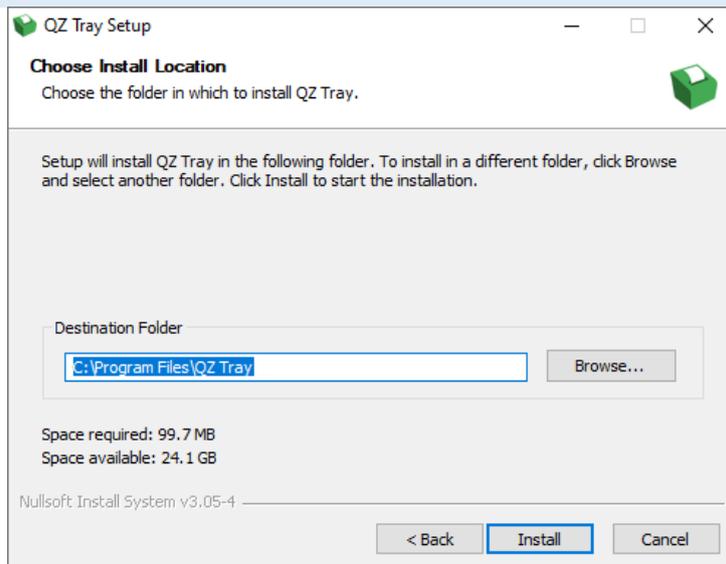

Passo 4: Aguarde o processo de instalação e selecione: "**Close**";

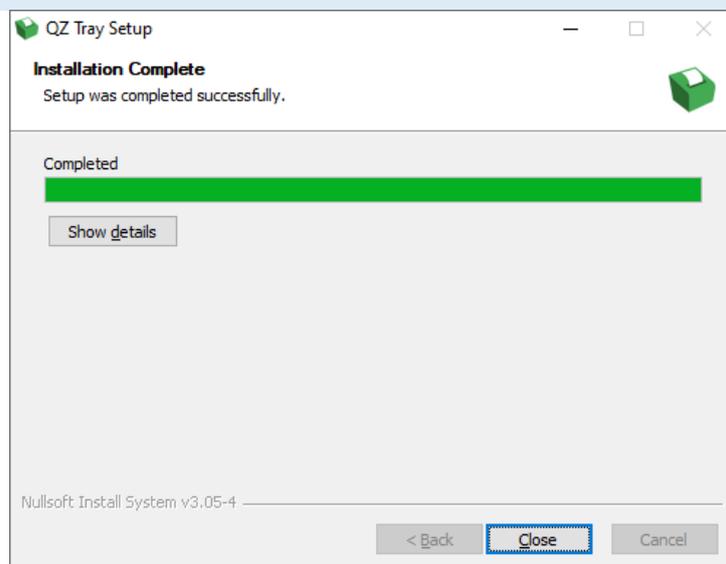

Pronto!

A instalação foi concluída com Sucesso!

Conclusão

As etiquetas solicitadas serão impressas com sucesso, não sendo necessário nenhuma configuração ou confirmação de assinatura digital.

Caso o ícone do QZ Tray apareça em algum momento em vermelho, procure o suporte para verificar a sua conexão.